

Napjainkban az élelmiszerbiztonsági szakemberek komoly kihívásokkal néznek szembe: összetett ellátási lánc, fokozott és egyre aprólékosabb ellenőrzések, az esetleges termékszennyeződés és a visszahívás kockázata. A szakembereknek biztosnak kell lenniük abban, hogy folyamataik szennyeződésmentesek és hatékonyan léphetnek közbe a termékbiztonság érdekében.

Ezért fejlesztették ki az **EnSURE™ Touch** új generációs minőségellenőrző rendszert, amely gyors és pontos higiéniai ellenőrzést biztosít az FSMA program támogatásához. Az 5 hüvelykes érintőképernyővel, vezeték nélküli szinkronizálási technológiával és felhőalapú szoftverekkel rendelkező EnSURE Touch kiválóan alkalmazkodik a munkájához és akár több helyszínen biztosítja az ellenőrzéshez, a kockázatelemzéshez és a megelőzéshez szükséges adatokat.

EnSURE™ Touch

Higiéniai ellenőrzés.
Önnek tervezve.



Hogyan segíthet az EnSURE Touch?

- 15 másodperc alatt elvégzi a felületek, folyadékok és termékek higiéniai vizsgálatát
- Teszteli és összehasonlítja a tisztítószeres és takarítási eljárások hatékonyságát
- Monitorozza a takarító személyzet a minőségellenőrzési és minőségbiztosítási munkatársak munkáját és segítség a kollégák oktatásában
- Támogatja az SSOP-t és objektíven bizonyítja a tisztítási szabványok betartását
- Gyorsan azonosítja a cserélhető alkatrészek (például övek, kefék) csereidejének szükségességét
- Feltérképezi és meghatározza azokat a problémás területeket, amelyekre több figyelmet kell fordítani
- Helyszíni oktatást és visszajelzés biztosít

Úgy nyújt segítséget, hogy

- Megfelel az FSMA, a GFSI és az ISO szabványoknak
- Segít megőrizni a márkanév elismertségét
- Megóvja a pénzügyi veszteségtől
- Alkalmazásával csökkenthető az ételmérgezők kockázata, elkerülhető az üzem bezárása és a termék visszahívása
- Alacsonyabb vizsgálati költségek a helyszíni méréseknek köszönhetően
- Biztosítja a HACCP-elvárásoknak megfelelő gondosságot



Kezében az innováció

Gyors teszt: tesztet futtathat bármely helyszínen mindössze két érintéssel.

Helyszínek: tesztelési pontok határozhatók meg egyedi mezőkkel és megfelelt/ nem felelt meg küszöb értékekkel asztali szoftver nélkül.

Tervek: könnyen csoportosíthatók a helyszínek tervekbe és a mintavétel lefedettségének biztosítása érdekében randomizálhatók a teszhelyek.

Felhasználók: a felhasználók és vezetők hozzáférése különbözik - fokozott rendszer ellenőrzés.

Eredmények és jelentések: könnyen megtekinthető teszteredményeket és trendelemzés.

Keresés: gyorsan megtalálható a konkrét tesztelési terv vagy helyszín, csökkentve ezzel a tesztek közötti időt.

Szinkronizálás: adatok vezeték nélküli szinkronizálása a SureTrend™ felhőbe.

Kalibrálás: gyárilag kalibrált és előre beállítható ellenőrzések a GMP/ISO megfelelés érdekében.

Újra tesztelés: a sikertelen teszhelyek áthúzásával és azonnali újramérésével igazolható a korrekciós tevékenységek hatékonysága.


MicroSnap™: teszteli és eredményt mutat olyan mikroorganizmusokra, mint a Coliform, az *E. coli*, az Enterobacteriaceae és a teljes élőflóra.*

Enzimek: Teszteli és eredményt mutat olyan enzimekre, mint az alkálikus foszfatáz és a savas foszfatáz.*

Beállítások: testre szabhatók a nyelv, egyéni mezők, tesztípusok beállításai és a versenytársak RLU-határ értékei.


Specifikáció: Méret: 7" x 3" x 1" • Súly 0.3 kg • Memória 2GBbelső + felhő tárhely

- Csatlakozás: USB vagy Wi-Fi* • Nyelv: többnyelvű támogatás • Akkumulátor: újratölthető lítium-ion akkumulátor USB-C töltővel • *Az akkumulátor élettartama a használat és konfiguráció függvénye
 - *Mikroorganizmus és enzim funkciók hamarosan elérhetők lesznek
 - *USB csatlakozás lesz elérhető a jövőbeni szoftverrel

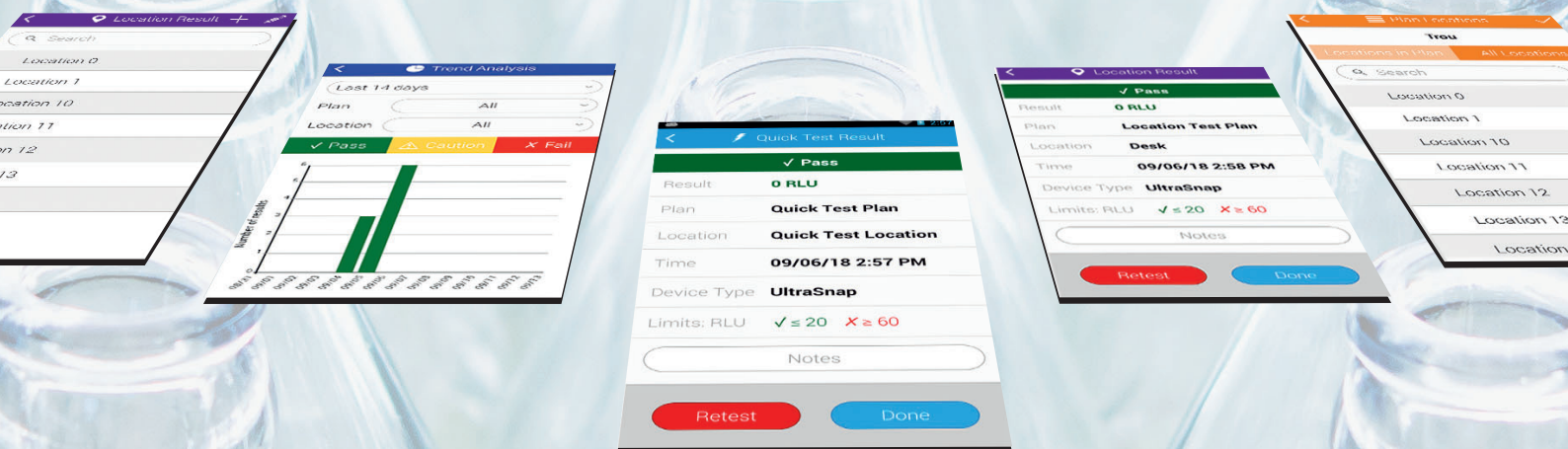

*Az akkumulátor élettartama a használat és konfiguráció függvénye. *Mikroorganizmus és enzim funkciók hamarosan elérhetők lesznek.

*USB csatlakozás lesz elérhető a jövőbeni szoftverrel.

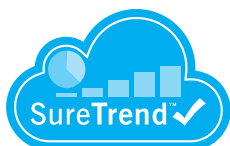

Dashboard



Results



Reports



Instrument



A kockázatelemzéshez szükséges adatok egy helyen érhetők el.

A SureTrend™ Cloud egy könnyen használható adatelemző szoftver, amely az EnSURE Touch használatával ingyenes. Mind a felhőalapú, mind az asztali formában elérhető SureTrend™ Cloud lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több laboratóriumban vagy üzemben figyelemmel kísérjék és nyomon kövessék a tesztelés eredményét, megtervezzék az automatikus riportokat, így a kockázatelemzés könnyebbé válik, mint korábban bármikor!

Jellemzők és előnyök:

- Egyidejű kommunikáció az osztály teljesítményéről a csapat és a vezetés számára
- A teljesen interaktív kezelőfelület gyors adatmegjelenítéssel pillanatokon belül
- Könnyen konfigurálható egy vagy több eszköz egyetlen SureTrend-fiókból
- Tesztellenőrzés egy vagy több helyszínen
- Automatikus jelentéseket küld közvetlenül e-mail címre
- A teljes online háttértámogatás egyetlen kattintásnyira
- Nyomon követheti az újbóli teszteléseket, amelyek rávilágítanak az átképzés lehetőségekre vagy megtalálhatja azokat az eszközöket, amelyek cserére szorulnak
- A teszteredményeket gyorsan megjeleníthetők táblázatokban és grafikonokon, amelyek a felhasználó igényei szerint konfigurálhatók
- Ingyenes frissítések opcionálisan vezeték nélküli szoftverfrissítésekkel
- Fejlett fotódióda technológia és egyedülálló reagens érzékenység a maximális érzékenység, eltarthatóság érdekében
- Az intuitív, intelligens vezérlés megkönnyíti a használatot
- A funkciói olyanok, mint egy okos telefonnak
- USB vagy Wi-Fi szinkronizálási képesség
- Többnyelvű támogatás
- 5 hüvelyk átmérőjű szilánkos törés ellen védett érintőképernyő
- Szakemberek távképzése a beépített képernyőmegosztással
- Beépített dőlésérzékelő a pontosabb leolvasáshoz
- Automatikus kikapcsolás az intelligens akkumulátor kezelés érdekében
- Szimulálja a versenytársak alsó és felső RLU-határértékeit



EnSURE™ Touch



Kompatibilis termékek

UltraSnap™ | Surface ATP Test



Catalog No. US2020 | Qty: 100

[Instructional Video Online](#)

SuperSnap™ | High-Sensitivity Surface ATP Test



Catalog No. SUS3000 | Qty: 100

[Instructional Video Online](#)

Catalog No. SUS3000X | Qty: 100

AquaSnap™ TOTAL | Water ATP Test



Catalog No. AQ-100X | Qty: 100

[Instructional Video Online](#)

AquaSnap™ FREE | Water ATP Test



Catalog No. AQ-100FX | Qty: 100

[Instructional Video Online](#)

CalCheck | LED Calibration Verification Device



Catalog No. CAU Qty: 1

[Instructional Video Online](#)

MicroSnap™ | Indicator Organism Tests



Catalog No. MS2-EB | Qty: 100

Catalog No. MS2-ECOLI | Qty: 100

Catalog No. MS2-TOTAL | Qty: 100

Catalog No. MS2-COLIFORM | Qty: 100



[Instructional Video Online](#)

ZymoSnap™ ALP | ALP Pasteurization Verification Test



Catalog No. ZS-ALP-100 | Qty: 100

[Instructional Video Online](#)

CROSS CHECK | ACP Cooking Efficiency Test



Catalog No. CX-3000 | Qty: 100

Terméknév	Cikkszám	Mennyiség
EnSURE Touch	ETOUCH	1
UltraSnap Surface ATP Test	US2020	100
SuperSnap High-Sensitivity Surface ATP Test	SUS3000	100
SuperSnap High-Sensitivity Surface ATP Test	SUS3000X	100
AquaSnap Total Water ATP Test	AQ-100X	100
AquaSnap Free Water ATP Test	AQ-100FX	100
MicroSnap Coliform & E. coli Enrichment Device	MS1-CEC	100
MicroSnap Enhanced Nutrient Broth	MS1-N-BROTH-9ML	100
MicroSnap Coliform Detection Device	MS2-COLIFORM	100
MicroSnap E. coli Detection Device	MS2-ECOLI	100
MicroSnap Enterobacteriaceae Enrichment Device	MS1-EB	100

Terméknév	Cikkszám	Mennyiség
MicroSnap Enterobacteriaceae Detection Device	MS2-EB	100
MicroSnap Total Enrichment Device	MS1-TOTAL	100
MicroSnap Total Detection Device	MS2-TOTAL	100
ZymoSnap ALP Alkaline Phosphatase Test	ZS-ALP-100	100
CrossCheck Acid Phosphatase Test	CX-3000	100
CalCheck LED Calibration Verification Device	CAL	1
ATP Positive Control Kit	CK25	25
ZymoSnap ALP Positive Control Kit	ZS-ALP-PC	5
Small Format Incubator	INCUBATOR	1
Lab Format Incubator	INCUBATOR2	1
BAX System Q7	ASY2018	1
BAX System X5	MCH2007	1

EnSURE Touch is factory calibrated and runs a calibration check on each startup. Recommended calibration control kits available.



www.bentleylabor.hu

Bentley Magyarország Kft.
8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.
labor@bentleyinstruments.com
Tel.: +36 22 414 100

