

# Inkubátorok és szárítószekrények

## SUPER széria

### Minden a kijelzőn

A színes érintőképernyőn különböző funkciók választhatók, ráadásul minden paraméter látható a kijelzőn: hőmérséklet, ventilátor sebessége, idő, programszám és lépés, USB pendrive jelenléte, dátum és idő.

### Könnyű használat

Egyszerűen állíthatók a működési paraméterek a könnyen értelmezhető ikonoknak és szimbólumoknak köszönhetően. A kapacitív kijelző-érintésbiztonságot és pontosságot biztosít még kesztyű viselése közben is.

### Programok


A profi vezérlő 8 tárolható programot tartalmaz, melyek mindegyike 8 lépésből áll, valamint egy további alaplóművelet (PROG 0) egyetlen lépéssel. Egyszerűen programozhatók a munkafolyamat lépései, amelyek egyetlen képernyőn láthatók.

### Biztonságos használat

A beállításokban 3 hozzáférési szint található: 1 szabad, 2 pedig jelszóval védett annak érdekében, hogy elkerüljük az „érzékeny” paramétereket véletlenszerű megváltoztatását.

### Adatok rögzítése és letöltése

A munkaciklusokat automatikusan tárolja a készülék, az USB portnak köszönhetően mindig letölthetők. USB eszköz behelyezésével a regisztráció kapacitáskorlát nélkül valósul meg.

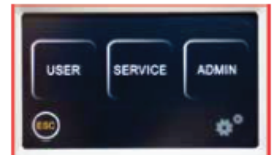

## PLUS széria

A Plus szériák legújabb verziója 7 programot tartalmaz 10 lépéssel, amelyek egy széles, háttérvilágítású LCD kijelzőn jelennek meg és az összes működési paraméter egyszerűen állítható be.

### Minden egyben

A háttérvilágítású LC kijelző minden paramétert megjelenít egy egyedi képernyőn: aktuális hőmérséklet, ventilátor sebesség és az aktuálisan futó program.

### Intuitív olvasás

A legfontosabb paraméterek könnyen olvashatók a világos és logikus elosztásnak köszönhetően, ebben nyújtanak segítséget a numerikus értékek, a szimbólumok és a felhasználóbarát ikonok.

### Könnyen használható

A beállításoknál használt gombok és lépések korlátozott száma garantálja a rendkívül gyors működést.

